



A Major Difference

Making a Difference in Your Health.™



Índice

¿Por qué desintoxicar?.....	3
Cómo funciona el IonCleanse®.....	4
Qué esperar de una sesión del IonCleanse®.....	5
Contraindicaciones.....	6
Investigaciones.....	7
Informes sobre seguridad.....	8
Premier™ de IonCleanse®.....	9
IonCleanse® vs. la competencia.....	11
Posible rentabilidad.....	12
Precio.....	13
Solo™ de IonCleanse®.....	14
Solo™ vs. Premier™.....	15
Precio.....	16
Nutrición de IonCleanse®.....	17
Acerca de AMD.....	18
Acerca del Dr. Bob Moroney.....	19
Formulario de pedido.....	20

¿Por qué desintoxicar?

Vivimos en el medioambiente más contaminado en la historia conocida de la Tierra. Constantemente inhalamos y asimilamos residuos de petroquímicos, plásticos y pesticidas que ocupan los sitios de los receptores de células y bloquean la utilización de las hormonas. Considere las siguientes estadísticas*:

- **Aumento del 1,600% de los defectos congénitos desde 1980.**
- **Aumento del 250% del cáncer de mama desde 1980.**
- **Reducción del 59% del número de espermatozoides desde 1940.**
- **Aumento del 500% de la mortalidad por cáncer desde 1900.**
- **Aumento del 400% de las enfermedades cardíacas desde 1900.**



Todas las estadísticas mencionadas están directamente relacionadas con la mayor exposición a petroquímicos, metales pesados y otros químicos y toxinas del medioambiente. Si bien ningún proceso ni modalidad pueden garantizar la prevención de estas condiciones, es lógico suponer que un programa continuo de desintoxicación —el proceso de minimizar la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo— reducirá la incidencia de enfermedades degenerativas crónicas y mejorará su calidad de vida en forma integral.



*Centro de Soluciones Sanitarias del Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (National Center for Disease Control and Prevention - Center for Health Solutions) (www.cdc.gov)

Cómo funciona el IonCleanse®

El baño iónico de pies IonCleanse® le ofrece una forma rápida y completa de limpiar y purificar su cuerpo con mayor eficacia y rapidez que cualquier protocolo herbario o de ayuno, con un estrés mínimo o nulo para el cliente.*

Se coloca el sistema dentro del agua junto con las manos, pies u otras partes del cuerpo. Cuando se enciende, la unidad de control envía una pequeña corriente directa hacia el sistema, lo que provoca que los metales del sistema, juntamente con el agua y la sal, generen iones con carga positiva y negativa. Estos iones neutralizan las partículas cargadas del cuerpo. Las partículas neutralizadas son eliminadas por el cuerpo a través de la piel por ósmosis y difusión.

La ósmosis y la difusión suponen el movimiento de partículas a través de una membrana desde una concentración más baja a una más alta. En este caso, la concentración más alta la constituye el campo de iones que el sistema establece dentro del agua.


A fin de explicar el proceso del IonCleanse®, los términos positivo y negativo se refieren a los fenómenos eléctricos, no a los químicos. Cuando se coloca el IonCleanse® en positivo, la corriente fluye hacia el polo positivo del sistema, lo que hace que se produzcan más iones negativos en el agua: $4H_2O + 4e^- \rightarrow H_2 + 4OH^-$.

En esta polaridad, el gas hidrógeno despiden humo del sistema, y lo que abunda en el agua son iones cargados negativamente. Por lo tanto, la polaridad positiva genera una concentración de iones negativos.

Cuando se coloca el IonCleanse® en negativo, la corriente fluye hacia el polo negativo del sistema, lo que hace que se produzcan más iones positivos en el agua, $H_2O \rightarrow O + 4H^+ + 4e^-$. En esta polaridad, el agua despiden gas oxígeno y lo que abunda en el agua son los iones cargados positivamente. Por lo tanto, la polaridad negativa genera una concentración de iones positivos. Este proceso se denomina electrólisis del agua.

La ionización es un proceso común. Sin embargo, el concepto de utilizar iones para baños de pies, como el IonCleanse®, es una idea relativamente nueva. En la naturaleza, el movimiento de las moléculas de agua genera iones.

Piense qué bien se siente cuando camina por la playa o cerca de una cascada. Lo que hacemos con el IonCleanse® es recrear esa reacción, pero magnificándola muchas veces.

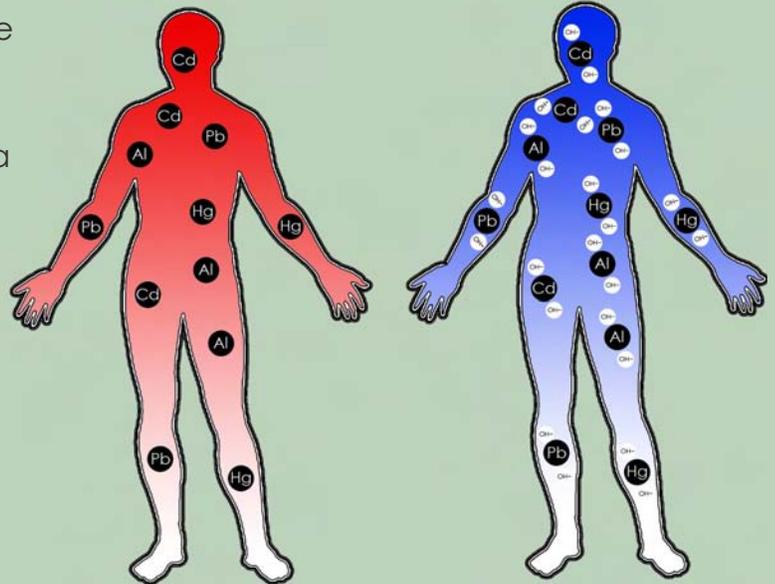

* La FDA no ha evaluado estas declaraciones. El IonCleanse® no se propone tratar, curar, prevenir ni diagnosticar ninguna enfermedad ni dolencia.

Qué esperar de una sesión



Las personas saludables pueden esperar sentirse más livianas y experimentar una maravillosa sensación de bienestar con cada sesión del IonCleanse®. Otras personas puede notar un incremento significativo de los niveles de energía y mejoras en los patrones de sueño.

Una sesión típica comenzará con agua limpia y terminará con agua que contenga partículas y tome color. El agua cambiará de color incluso si no se colocan los pies en la tina. Este cambio es producto de la interacción entre las toxinas y las partículas que ya se encuentran en el agua, la sal agregada y otros metales del sistema. El color básico que producen estas reacciones varía de un área geográfica a otra. Como regla general, las toxinas regionales constituyen un 0-40% de los residuos que se encuentran en el agua después de un baño de pies.

Hemos descubierto que una sesión de purificación de una persona invalidará la toxicidad geográfica del agua. De acuerdo con la prueba de EAV (Electroacupuntura según Voll), el cuadro a continuación muestra lo que pensamos que representan los colores en el agua:

COLORS AND OBJECTS IN THE WATER

Color or Particle	Material or Area of the Body
Yellow-Green	Purifying the kidney, bladder, urinary tract, female/prostate area
Orange	Purifying the joints
Brown	Purifying the liver; tobacco, cellular debris
Black	Purifying the liver
Dark Green	Purifying the gallbladder
White Foam	Purifying from the lymphatic system
Black Flecks	Heavy metals
Red Flecks	Blood clot material

Contraindicaciones

Las personas que pertenecen a una o más de las siguientes categorías no deberían utilizar el sistema IonCleanse®:

- los usuarios de marcapasos u otros implantes eléctricos o a batería;
- las mujeres embarazadas o que amamantan;
- toda persona que toma medicación para regular la frecuencia cardíaca;
- toda persona que toma anticoagulantes;
- toda persona que ha recibido un trasplante de órgano;
- toda persona que toma medicación, cuya falta podría incapacitarle mental o físicamente, por ejemplo con episodios sicóticos, convulsiones, etc.

Además, debería considerar seriamente las siguientes recomendaciones:

- Para ser efectivos, muchos medicamentos requieren que se mantenga el nivel arterial. Puede programar su sesión del IonCleanse® justo antes de administrar la medicación de manera que el cliente pueda mantener los niveles arteriales adecuados.
- Asegúrese de que los clientes con bajo nivel de azúcar en sangre hayan comido antes de someterse a una sesión del IonCleanse®. El IonCleanse® suele disminuir el nivel de azúcar en sangre en los diabéticos y puede hacerlo en las personas hipoglucémicas.
- Como regla general, puede usar el IonCleanse® con clientes que se someten a diálisis, se administran insulina o que padecen insuficiencia cardíaca congestiva. Una purificación suave ayudará a que el cuerpo elimine toxinas que el riñón y el corazón no pueden eliminar por sí solos, pero no interferirá con la medicación ni reducirá los niveles de insulina.
- Puede trabajar con personas que se han sometido a una prótesis de articulación metálica, aunque algunas hallan que la exposición a un campo electromagnético les resulta demasiado incómoda. Si el cliente se siente incómodo, suspenda inmediatamente la sesión.



Investigaciones

Como lo determinó Doctor's Data (febrero del 2002), el siguiente cuadro representa el aumento promedio de metales tóxicos presentes en el agua luego de nueve sesiones del Cleanse®. En nuestro sitio web, www.amajordifference.com, puede encontrar más información sobre las investigaciones.

Metal	*Before (ppb)	*After (ppb)	Percentage Change
Antimony (Sb)	1.09	2.48	128%
Arsenic (As)	2.53	3.93	55%
Copper (Cu)	363.66	3656.11	905%
Lead (Pb)	2.45	8.16	233%
Uranium (U238)	3.08	5.58	81%
Barium (Ba)	60.2	74.3	23%
Cadmium (Cd)	5.55	12.15	119%
Chromium (Cr)	13958.44	22838.88	63%
Nickel (Ni)	411.48	672.52	63%
Aluminum (Al)	216.33	950.33	339%
Iron (Fe)	50645.66	138918.11	174%
Manganese (Mn)	218.77	524.44	140%
Zinc (Zn)	148.44	288.22	94%

*La columna "Antes" representa el agua después de una sesión del IonCleanse® de 30 minutos sin colocar los pies en el agua. La columna "Después" representa el agua después de una sesión del IonCleanse® de 30 minutos con los pies dentro del agua.

Se analizaron el berilio, el mercurio, el talio y el selenio y no mostraron cambios significativos luego de sesiones del IonCleanse®.

Informes sobre seguridad

Puesto que el IonCleanse® utiliza electricidad y agua para purificar el cuerpo, se ha considerado la seguridad. Por ello, las unidades IonCleanse® son los únicos baños iónicos de pies que existen en el mercado que han recibido autorización de la FCC y la CE. Los informes detallados, cada uno de los cuales tiene aproximadamente 150 páginas, incluyen:

- Informe del análisis de emisiones conducidas
- Informe del análisis de inmunidad electromagnética
- Informe del análisis de seguridad del Premier™ de IonCleanse®
- Informe del análisis de seguridad del Solo™ de IonCleanse®
- Informe del análisis de emisiones radiadas

Los informes completos están disponibles en www.amajordifference.com. Si bien otras unidades del mercado aducen contar con las mismas aprobaciones, no pueden producir la misma documentación. Solicite que le muestren los informes de seguridad completos antes de tomar una decisión.



Premier™ de IonCleanse®



Introducido en marzo del 2002, Premier™ de IonCleanse® continúa siendo el sistema purificador integral para el cuerpo más eficaz disponible en el mercado en la actualidad. Como líder en el mercado de baños iónicos de pies, el Premier™ ofrece:

1. **Cinco programas de sesión**

Como cualquier otra modalidad de limpieza, la versatilidad es extremadamente importante. Con el Premier™ de IonCleanse® el usuario puede elegir uno de cinco programas, lo que permite que casi cualquier persona pueda utilizar el equipo. La mayoría de las otras unidades disponibles en el mercado ofrecen un solo programa de sesión única. Los usuarios de estas unidades “monopolares” pueden terminar quejándose de mareos, náuseas y aturdimiento durante la sesión. Estos efectos se atribuyen al uso de la polaridad incorrecta. Los usuarios del IonCleanse® casi nunca experimentan estas sensaciones.

2. **Polaridad doble**

El Premier™ de IonCleanse® tiene la capacidad de cambiar de una polaridad positiva (que produce predominantemente iones negativos en el agua) a una polaridad negativa (que produce predominantemente iones positivos en el agua) y viceversa. La configuración patentada de nuestro sistema es la única de su clase que produce iones positivos y negativos en el agua.

3. **Aprobación de la FCC y la CE**

El Premier™ de IonCleanse® utiliza corriente directa para realizar la electrólisis en el agua. La corriente directa se origina en un toma de corriente alterna de pared. El Premier™ de IonCleanse® y el Solo™ de IonCleanse® son los únicos baños de pies que han recibido aprobaciones de seguridad de la FCC y la CE, lo que hace que entre los baños iónicos de pies sean los más seguros que se encuentran en el mercado.

Cont. Premier™ de IonCleanse®

4. Servicio de reparación de unidades en garantía

Si durante el período de garantía tiene algún inconveniente con su Premier™ de IonCleanse® que se debe a defectos de fabricación, AMD le enviará de un día para otro una unidad temporaria (disponible para los residentes de los EE. UU. únicamente) y le brindará un servicio de devolución prepago de su unidad fallada.

5. Servicio y soporte al cliente de por vida

El uso de dispositivos de ionización es mucho más complicado que el simple hecho de colocar los pies en el agua y encender un botón. El motivo de la popularidad y el éxito de AMD es el soporte clínico que proporcionamos en forma continua para quienes adquieren el producto para uso personal o profesional. Le enseñamos a usar la unidad en forma segura y efectiva; estamos disponibles durante el horario comercial para ayudarle a resolver sus dificultades personales o profesionales, y le ofrecemos continuas oportunidades educativas por medio de seminarios y capacitación profesional.

6. Fabricado en los EE. UU.

Las unidades de baño iónico de pies IonCleanse® se fabrican y ensamblan en los Estados Unidos. Estrictas normas de control de calidad, junto con un equipo de ingenieros que combinan más de 100 años de experiencia, garantizan que el producto IonCleanse® sea el baño iónico de pies número uno en el mercado actual. Con un porcentaje de fallas inferior al 1% desde marzo del 2002, el Premier™ de IonCleanse® cuenta con una trayectoria **inigualable**.



IonCleanse® vs. la competencia

Las unidades IonCleanse® son los únicos baños iónicos de pies del mercado que han aprobado las normas eléctricas de seguridad de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones por sus siglas en inglés) y la CE (Conformidad Europea, por sus siglas en inglés). Mientras que varios de nuestros competidores aducen que cuentan con las mismas aprobaciones, nuestro análisis confirmó que ninguna de las unidades aprobó todas las evaluaciones de seguridad que ha aprobado el IonCleanse®.

A Major Difference, Inc. contrató a EMC Integrity Incorporated and Compliance Integrity Services para que evalúe seis unidades de baños iónicos de pies. Se analizaron las unidades respecto de las Emisiones radiadas y se evaluaron de acuerdo con la Norma 60035-1 de la IEC (Comisión Internacional Electrotécnica). En el siguiente cuadro encontrará el resumen de los resultados:

Ionic foot bath safety comparison chart							
							
	IonCleanse®	Spa Cleanse	Cell Spa	Aqua Chi	IonSpa	Aqua Detox†	eSpa (B.E.S.T. Unit)
Product Safety Evaluation - IEC 60035-1	Pass	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL
Radiated Emissions Test	Pass	FAIL	FAIL	Pass	Pass	Pass	Pass
Flammability Rated (UL94V-1)	Pass	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	Pass	Pass
Accessibility of Hazardous Voltage Test	Pass	Pass	FAIL	FAIL	Pass	FAIL	FAIL
Leakage Current Test	Pass	Pass	FAIL	FAIL	Pass	FAIL	FAIL
CE Cleared	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO
Place of manufacture	Colorado	China	China	Alabama	Texas/Louisiana	United Kingdom	Nevada

† The Aqua Detox unit received a CE rating from an agency in Europe. However, because this testing occurred in the United States, it failed several of the tests based on US standards.

AMD, el reconocido líder de la industria de baños iónicos de pies, está profundamente preocupado por estas cuestiones porque se reflejan negativamente sobre la industria en su conjunto. AMD realiza todo su esfuerzo para educar al consumidor y guiar a posibles clientes del mercado. Si usted es un profesional, debe preocuparle la responsabilidad. Es posible que las compañías de seguros no cubran los daños causados por unidades que no cumplen con las normas reglamentarias. Como usuario individual, debe preocuparse por su seguridad y la de su familia.

† Aqua Detox® es una marca registrada de Aqua Detox USA, Inc.

†† IonSpa® es una marca registrada de BellaSpa LLC.

Posible rentabilidad

El Premier™ de IonCleanse® le ofrece una forma eficaz y completa de limpiar y purificar el cuerpo. Sin embargo, el IonCleanse® también brinda al profesional una generosa fuente de ingresos. El cargo promedio por una sesión de IonCleanse® es de 40 dólares. Como lo demuestra el cuadro que sigue, el IonCleanse® normalmente se paga solo dentro de los dos primeros meses de uso. De hecho, el 70% de los profesionales que adquieren el Premier™ de IonCleanse® adquieren una segunda unidad dentro de los 90 días.

# of Sessions Per Week	Price Per Session					
	\$25	\$30	\$35	(National Average) \$40	\$45	\$50
5	\$125	\$150	\$175	\$200	\$225	\$250
10	\$250	\$300	\$350	\$400	\$450	\$500
15	\$375	\$450	\$525	\$600	\$675	\$750
20	\$500	\$600	\$700	\$800	\$900	\$1,000
25	\$625	\$750	\$875	\$1,000	\$1,125	\$1,250
30	\$750	\$900	\$1,050	\$1,200	\$1,350	\$1,500
35	\$875	\$1,050	\$1,225	\$1,400	\$1,575	\$1,750
40	\$1,000	\$1,200	\$1,400	\$1,600	\$1,800	\$2,000
Weekly Gross						



AMD le recomienda ofrecer sesiones gratuitas a los clientes una vez que adquiera el equipo inicial. Cuando los clientes conozcan los beneficios del uso del IonCleanse®, pueden venderse paquetes de seis a diez sesiones con un descuento del 10% por ciento. A 40 dólares por sesión, con menos de ocho personas que adquieran un paquete de diez sesiones ya habrá pagado el total de la unidad.

Precio


ionCleanse® Premier™
\$2,895.00

ó
\$ 2,495 cada uno cuando
adquiere dos o más

*Garantía por dos años.
Le devolvemos el 85% de su
dinero antes de los 60 días*



El paquete incluye:

- Un sistema
- Un set de placas adicionales
- Un cable adicional para el sistema
- Folletos para 100 clientes
- Paquete de marketing de IonCleanse®
- Tina para pies de IonCleanse®
- Fundas para la tina para pies
- Líquido limpiador
- RealSalt
- Estuche portátil
- DVD y cuadernillo instructivos
- CD-ROM con archivos adicionales
- Servicio y soporte de por vida

Solo™ de IonCleanse®

El Solo™ de IonCleanse® es el último baño iónico de pies creado por A Major Difference, Inc. Ahora disponible para uso doméstico, el Solo™ permite que las personas y las familias tengan la oportunidad de experimentar el proceso del IonCleanse® sin necesidad de una inversión im`portante. Las características del Solo™ de IonCleanse® Solo™ son:

1. Un solo programa

Este único programa del Solo™ de IonCleanse® es una combinación 70/30 de iones positivos a iones negativos. El programa se adapta a la mayoría de los usuarios y es ideal para el uso no profesional.

2. Doble polaridad

Al igual que el Premier™, el Solo™ tiene la capacidad de crear iones positivos y negativos en el agua. Esto se debe en gran parte a la configuración patentada del sistema, esta característica de doble polaridad ofrece una sesión de purificación más abarcativa que las de otras unidades de baños iónicos de pies del mercado.

3. Aprobación de la FCC y la CE

El Solo™ de IonCleanse® utiliza corriente directa para realizar la electrólisis en el agua. La corriente directa se origina en un toma de corriente alterna de pared. El Premier™ de IonCleanse® y el Solo™ de IonCleanse® son los únicos baños de pies que han recibido aprobaciones de seguridad de la FCC y la CE, lo que hace que entre los baños iónicos de pies sean los más seguros que se encuentran en el mercado.

4. Servicio y soporte al cliente de por vida

El uso de dispositivos de ionización es mucho más complicado que el simple hecho de colocar los pies en el agua y encender un botón. El motivo de la popularidad y el éxito de AMD es el soporte que proporcionamos en forma continua para quienes adquieren el producto tanto para uso profesional como personal. Le enseñamos a usar la unidad en forma segura y efectiva.

5. Fabricado en los EE. UU.

Las unidades de baño iónico de pies IonCleanse® se fabrican y ensamblan en los Estados Unidos. Estrictas normas de control de calidad, junto con un equipo de ingenieros que combinan más de 100 años de experiencia, garantizan que el producto Solo™ de IonCleanse® sea el baño iónico de pies número uno en el mercado actual.

Solo™ vs. Premier™

El Solo™ de IonCleanse® es el baño iónico de pies de uso personal. Viene con todo lo necesario para comenzar a usarse, incluida una tina para pies y fundas, un sistema, un limpiador, sal, un DVD y cuadernillos instructivos y una garantía limitada por un año por repuestos y reparación del IonCleanse®. El cuadro a continuación detalla las diferencias entre las unidades de IonCleanse®.

	Solo™ 	Premier™ 
What is included in purchase?	60-day 85% money-back guarantee One array IonCleanse® foot tub Foot tub liners Liquid Sparkle Cleaner RealSalt Protective carrying case Instructional DVD & Booklet CD-ROM with additional files Lifetime service and support	60-day 85% money-back guarantee One array IonCleanse® foot tub Foot tub liners Liquid Sparkle Cleaner RealSalt Protective carrying case Instructional DVD & Booklet CD-ROM with additional files Lifetime service and support One extra set of plates One extra array cord 100 client brochures The IonCleanse® Marketing Package
Limited Warranty	1 year	2 years
Extended Warranty (two additional years)	\$200	\$350
Dual Polarity	Yes	Yes
Number of session programs	1	5
Overnight warranty repair service	No	Yes*
CE & FCC Approved	Yes	Yes
Price	\$1,995	\$2,895

*Available to US residents only

Precio


ionCleanse® Solo™

\$1,995.00

*Garantía por un año
y le devolvemos el 85%
de su dinero antes de los
60 días*



El paquete incluye:

- Un sistema
- Tina para pies de IonCleanse®
- Fundas para la tina para pies
- Líquido limpiador
- RealSalt
- Estuche portátil
- DVD y cuadernillo instructivos
- CD-ROM con archivos adicionales
- Servicio y soporte de por vida

For questions, or to place an order, call (877) 315-8638, or visit us at www.amajordifference.com

Nutrición de IonCleanse®

Como sucede con cualquier programa de purificación, la hidratación y los consejos nutricionales revisten vital importancia. A Major Difference, Inc. ofrece una completa línea de nutrición para uso personal y profesional. Estos productos mejorarán enormemente el proceso del IonCleanse® y brindarán amplio asesoramiento en todo el programa de purificación.

Ofrecemos los siguientes productos a precios minoristas y mayoristas:

Barrita energética con anabólicos PaleoBar-DF™

Las PaleoBars™ son mucho más que simples barras energéticas. Estas barras son deliciosas y no contienen fructuosa. Sí contienen suero nutritivo, ácidos grasos omega 3, fibra, glutamina, fosfatidilcolina y antioxidantes para proporcionar soporte inmunitario y una nutrición rápida y satisfactoria.

Polvo de limón o lima PaleoGreens

PaleoGreens™ es un polvo con delicioso sabor a limón o lima elaborado con ingredientes orgánicos.

Polvo PaleoCleanse de 756 gm

Finalmente, un completo polvo alimentario funcional para desintoxicar que sabe muy bien y contiene bajos niveles de carbohidratos y ¡nada de fructuosa!

Probiotic Synergy: 90 cápsulas

Probiotic Synergy hace uso de una tecnología de presentación recientemente patentada. Fue diseñada para garantizar la supervivencia de las bacterias que pasan por el estómago y siguen hacia el intestino delgado.

Omega Ultra Marine: 120 cápsulas blandas

Se han elegido cuidadosamente las materias primas y se ha realizado una purificación exhaustiva para garantizar que las cápsulas blandas de Omega Synergy Marine no contengan ningún tipo de contaminación de los contaminantes del medio ambiente.

¡Y más...!

Podrá obtener mayores detalles de cada uno de los productos, incluidos los ingredientes y la etiqueta del producto, en www.amajordifference.com.

Acerca de AMD

El Dr. Bob Moroney fundó A Major Difference, Inc. en Denver, Colorado, en enero del 2002. Desde entonces ha vendido más de 10,000 unidades de baños iónicos de pies. Su éxito continuo hace del IonCleanse® el sistema de purificación integral para el cuerpo n.º 1 del mercado.

Todos nuestros productos, incluido el IonCleanse®, se fabrican en los Estados Unidos. Nuestros ingenieros combinan más de 100 años de experiencia. Del mismo modo, todas las unidades del IonCleanse® se ensamblan a mano y luego atraviesan rigurosas medidas de control de calidad para garantizar la satisfacción total del cliente.



Puesto que todas nuestras operaciones se realizan en Colorado, nuestros clientes tienen los siguientes beneficios:

- Los pedidos de productos se envían en el día.
- La mayoría de los equipos se reparan de un día para otro.
- Servicio de atención al cliente de 8 am a 6 pm MST (Hora estándar de la montaña).



Acerca del Dr. Bob Moroney

En 1982, a Bob le diagnosticaron cáncer de pulmón. Luego de recibir el diagnóstico se sometió a un programa de transformación de su vida que incluía una modificación de los hábitos alimentarios, una desintoxicación total y exhaustiva de su cuerpo con enemas y una gran variedad de fórmulas herbarios, y finalmente, un arduo viaje de trece años para recorrer los enojos, odios, y resentimientos que había acumulado en su cuerpo a lo largo de su polémica vida.

El viaje de Bob lo expuso a la medicina china y ayurvédica, la acupuntura y las técnicas norteamericanas de limpieza que incorporó a su práctica privada durante los 16 años que transcurrieron entre 1985 y el 2000. En el año 2000 se topó por primera vez con la tecnología de ionización. Los protocolos de desintoxicación que había estado utilizando para sí eran físicamente duros, le exigían a su cuerpo un gasto significativo de energía para deshacerse de las toxinas que los remedios herbarios y homeopáticos liberaban al torrente sanguíneo. Pronto descubrió que la primitiva tecnología de ionización que le habían introducido desde Australia permitía que el cuerpo lograra más eficazmente el proceso que estos remedios habían comenzado.

A través de un viaje curativo que continúa hasta la actualidad, Bob se ha abocado a perfeccionar un dispositivo que profundizaría la respuesta de relajación del cuerpo para crear la cantidad precisa de presión osmótica que maximizaría la cantidad de toxinas liberadas al agua durante cada sesión.



‘No es posible desintoxicar más allá de lo que uno está dispuesto a liberar en términos emocionales’.

Robert E. Moroney, maestría en humanidades, diploma de anestesiología